

PACKNING AV PROVER

Packning av prover från en vårdenhet utanför sjukhusområdet i Sundsvall till Patologi- och Cytologienheten.

OBS! Prover till Patologi- och Cytologienheten ska inte sampackas med prover till Laboratoriemedicin.

Transport med Regionens bilar

För transport med regionens bilar används befintliga transportlådor. Tänk på att inte skicka ofixerade prover som ska kylförvaras en fredag så att de riskerar att stå över helgen i rumstemperatur. I så fall är det bättre att förvara proverna i kylskåp över helgen och skicka med första morgontransporten på måndag.

Formalinångor kan påverka färgbarheten på utstryksglas därför bör man sätta en extra plastpåse runt transporthylsan med utstryksglas om den ska transporteras i samma låda som formalinfixerade prover.


Transport av prover med Postnord

Packa proverna enligt direktiv på Folkhälsomyndighetens hemsida, [Packa provet rätt](#).

Fixerade prover där smittrisken är minimal klassificeras som undantaget medicinskt prov och packas enligt bild nedan. Ytterförpackningen märks med en etikett för

”undantaget medicinskt prov”. Mallar för utskrift finns på [rvn.se](#).

Figur 4. Exempel på förpackning av prover som skickas som undantaget medicinskt prov. I detta exempel används en plastpåse med tät tejpförslutning som sekundärförpackning och ett vadderat kuvert som ytterförpackning.

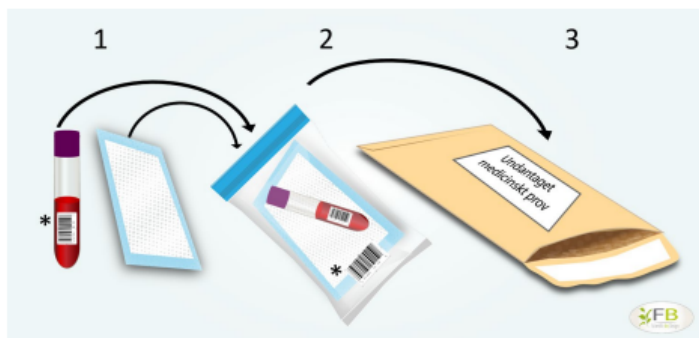

* Prover som skickas till Folkhälsomyndigheten för analys ska vara märkta med ProviD (t.ex. en etikett med streckkod eller personnummer) på både primärkärl och sekundärförpackning.